



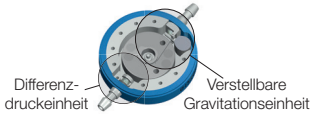

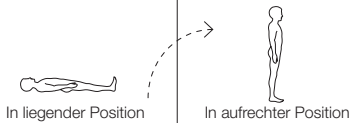

Patient	Druckstufenauswahl		Gesamt Öffnungsdruck	
				
Neugeborene 	5*	20	5*	25
Kinder ab 3 Jahren 		25		30
Erwachsene < 1,60 m > 1,80 m 		25		30
		20		35
Erwachsene ab 65 Jahren 		20		25
< 1,60 m > 1,80 m	15	30		

Standard Druckstufen für *M.blue*® und *M.blue plus*®

Das *M.blue* besteht aus einer Differenzdruckeinheit und einer verstellbaren Gravitationseinheit.

Der Ventilöffnungsdruck des *M.blue* wird im Liegen **nur** durch die Differenzdruckeinheit bestimmt.

Die Gravitationseinheit ist in der liegenden Position nicht aktiv.

Für die aufrechte Körperposition errechnet sich der Öffnungsdruck aus **der Summe** von Differenzdruck- und Gravitationseinheit.



Mit der MietHKE App kann man die Funktionsweise des *M.blue* in den verschiedensten Körperpositionen nachvollziehen.

Jetzt im App und Google Play Store erhältlich.

Alle hier abgebildeten Druckstufen sind in cmH₂O angegeben. Dies ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Arzt entscheidet in jedem Fall individuell. Die angegebenen Werte berücksichtigen den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis bis 06/2018.

* Zusätzlich zur Standardausführung stehen für das *M.blue* auch Differenzdruckeinheiten mit den Druckstufen 0, 10, 15 cmH₂O zur Verfügung. Bei *M.blue plus* ist der Öffnungsdruck der Differenzdruckeinheit (proGAV 2.0) von 0-20 cmH₂O einstellbar.

Hersteller:






CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | Germany
Tel. +49 331 62 083-0 | Fax +49 331 62 083-40
www.mietHKE.com

Vertrieb:

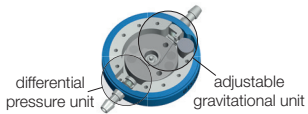B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

AESCULAP® – a B. Braun brand
Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-26 00 | www.aesculap.de

Patient	Selection of pressure levels		Opening pressure in total		
		differential pressure unit adjustable gravitational unit	horizontal position	upright position	
Newborn 			5*	20	5*
Children from 3 years 	30				
Adults < 1,60 m > 1,80 m 	25	30			
	20	25			
30	35				
Adults from 65 years 	20	15	25	25	
< 1,60 m				20	
> 1,80 m				30	

Standard pressure levels for *M.blue*® and *M.blue plus*®

The *M.blue* consists of a differential pressure unit and an adjustable gravitational unit.

The opening pressure of *M.blue* in the horizontal position is **only** determined by the differential pressure unit.

In the lying position the gravitational unit is not active.

The opening pressure in the vertical position is **the sum** of both: differential pressure unit and adjustable gravitational unit.



The Miethke App demonstrates the functionality of *M.blue* and the effect of patient posture on valve opening pressure.

Now available in the App and Google Play Store.

All indicated pressure levels are in cmH₂O. This recommendation is non-binding. The physician decides in each case individually. The stated values consider the current scientific knowledge up to June 2018.

* As special configurations in addition to the standard configuration the *M.blue* is also available with differential pressure units with pressure levels 0, 10, 15 cmH₂O. In case of *M.blue plus* the opening pressure of the differential pressure unit (*proGAV 2.0*) is adjustable from 0-20 cmH₂O.

Manufacturer:

CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO. KG

Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | Germany

Phone +49 331 62 083-0 | Fax +49 331 62 083-40

www.miethke.com

Distributor:

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

AESCLAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany

Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-26 00 | www.aesculap.com