

# Dermaslide®

Auffällig unauffällig ab dem ersten Stich

Die neue Nadel mit der exklusiven Golfball-Technologie



Sutures

# Dermaslide®

Auffällig unauffällig ab dem ersten Stich



Ein Schnitt in die Haut. Eine erfolgreiche OP. Die Wunde wird geschlossen. Es entsteht eine Narbe. Sie bleibt.

Für den Patienten ist seine Narbe eine sichtbare Erinnerung an die OP, den Operateur und den Aufenthalt in der Klinik. Deshalb arbeiten wir bei B. Braun fortwährend an der Entwicklung von chirurgischen Instrumenten und Nadeltechnologien, die die Haut als größtes menschliches Organ schützen, indem sie besonders präzise und gewebeschonend arbeiten und den Wundheilungsprozess unterstützen. Dieser Anspruch ist in uns. Und in Dermaslide®.

## » Denn auffällig unauffällige Narben geben ...

## Patienten, Chirurgen und der Klinik

Die spezielle Golfball-Technologie verschafft der neuen Dermaslide® Nadel ein außergewöhnliches Handling für ein exzellentes kosmetisches Ergebnis.

#### Vorteile der Dermaslide® Nadel

- Eindrucksvolles Gleitverhalten durch alle Gewebestrukturen
- Reduzierter Kraftaufwand, auch nach wiederholtem Einstechen
- Herausragende Nadelstabilität

#### Indikationen

Dermaslide® ist indiziert in den Anwendungsbereichen, in denen gemäß chirurgischer Praxis eine Präzisionsnadel speziell für den Hautverschluss eingesetzt wird, besonders in der:

- Plastischen- und Wiederherstellungschirurgie
- Viszeralchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie


... ein gutes Gefühl. «

# Dermaslide®

Auffällig unauffällig ab dem ersten Stich




Die Dermaslide® Nadel, mit der hochwertigen Stahllegierung L300 Quality Steel und der speziellen Wärmebehandlung, zeichnet sich durch eine ausgewogene Balance zwischen Biege- und Bruchfestigkeit aus.

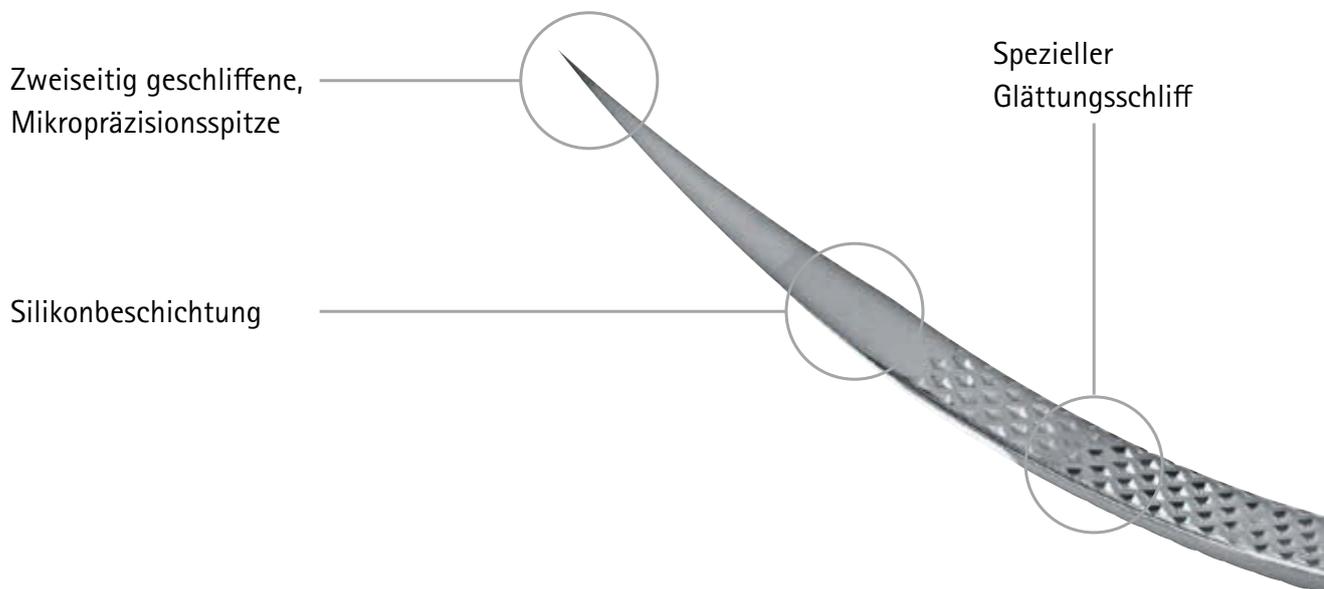




Dank der speziellen Geometrie, innovativen Oberflächenbeschaffenheit und Silikonbeschichtung erfüllt die Dermaslide® Nadel alle Voraussetzungen für ein kosmetisch herausragendes Ergebnis.

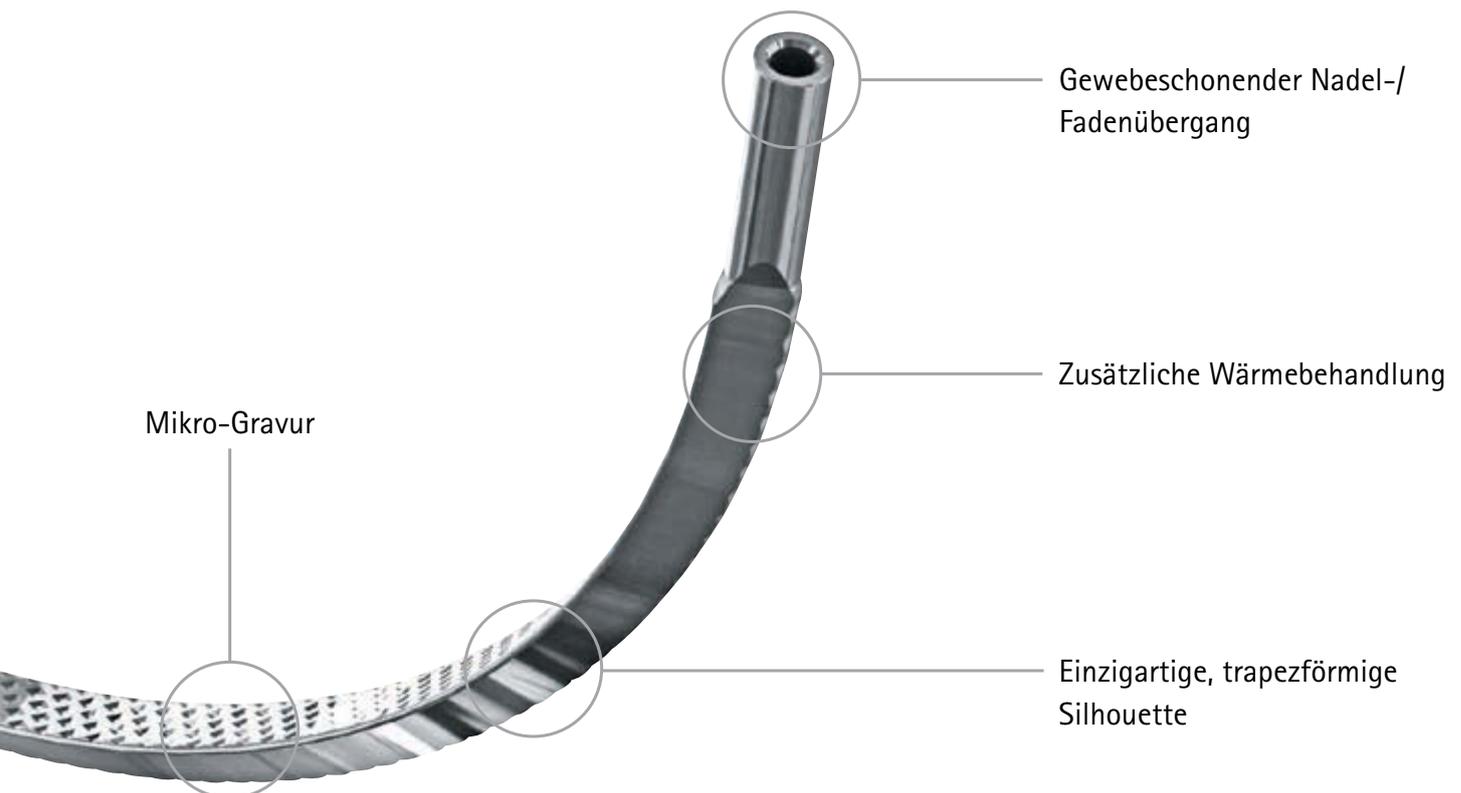


# Dermaslide®

Auffällig unauffällig ab dem ersten Stich

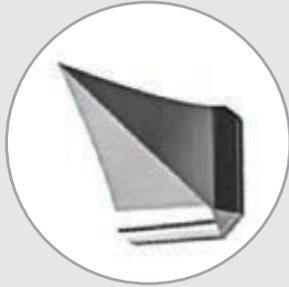


■ **Zweiseitig geschliffene, Mikropräzisionsspitze**

erleichtert das Einstechen und verringert somit das Gewebetrauma.

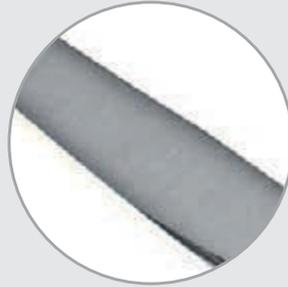

■ **Silikonbeschichtung**

erlaubt der Nadel ein sanftes Gleiten durch das Gewebe.

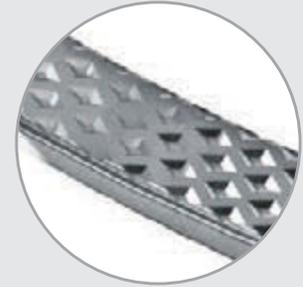

■ **Spezieller Glättungsschliff**

Die vier schneidenden Kanten der Nadel sind speziell geschliffen damit diese sich nicht abnutzen und ein angenehmer Durchzug ermöglicht wird.


## » Ihre Vorteile auf einen Blick

✓ Weniger Kraftaufwand beim Durchstechen

✓ Vermindertes Gewebe ausbrechen


✓ Sauberer Durchgang

✓ Stabiler Halt im Nadelhalter

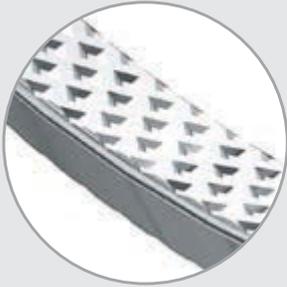

■ **Mikro-Gravur**

in der Golfball-Technologie für reduzierten Gewebewiderstand.

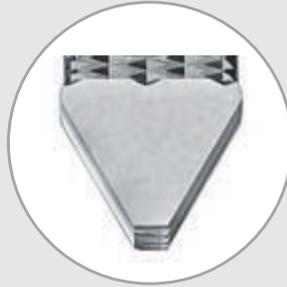

■ **Einzigartiger trapezförmige Nadelkörper**

reduziert das Gewebetrauma und ermöglicht stabilen Halt im Nadelhalter.



■ **Zusätzliche Wärmebehandlung**

bietet eine ausgewogene Balance zwischen Bruchsicherheit und Dehnbarkeit der Nadel

# Dermaslide®

Nadel-Faden-Kombinationen



## Monosyn®

Mittelfristig reißfestes, resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Glykonat

3/8 Kreis Mikro-Gravur Mikrospitze	Länge cm	Farbe	6/0	5/0	4/0	3/0	USP metric
			0,7	1	1,5	2	
DGMP 11 	45	ungefärbt	C0023709	C0023705			
DGMP 13 	45	ungefärbt	C0023710	C0023706	C0023702		
DGMP 16 	45	ungefärbt		C0023707	C0023703		
DGMP 19 	45	ungefärbt		C0023708	C0023704		
	75	ungefärbt				C0023701	

# Monosyn® Quick

Kurzfristig reißfestes, resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Glykonat

3/8 Kreis Mikro-Gravur Mikrospitze	Länge cm	Farbe	6/0	5/0	4/0	3/0	USP
			0,7	1	1,5	2	metric
DGMP 11 	45	ungefärbt	C0025807	C0025805			
DGMP 13 	45	ungefärbt		C0025806	C0025802		
DGMP 16 	45	ungefärbt			C0025803		
DGMP 19 	45	ungefärbt		C0025808	C0025804		
	75	ungefärbt				C0025801	

# Dafilon®

Nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polyamid

3/8 Kreis Mikro-Gravur Mikrospitze	Länge cm	Farbe	6/0	5/0	4/0	3/0	USP
			0,7	1	1,5	2	metric
DGMP 11 	45	blau		C0933908			
DGMP 13 	45	blau		C0933906	C0933903		
DGMP 16 	45	blau		C0933907	C0933909		
	75	blau			C0933904	C0933902	
DGMP 19 	45	blau		C0933911	C0933910		
	75	blau			C0933905	C0933901	

#### Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

#### Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach  
Tel. +41 58258 5000 | Fax +41 58258 6000 | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland  
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | [www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

Aesculap – a B. Braun company

Die Produktmarken „Dafilon“ und „Dermaslide“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG.

Die Produktmarke „Monosyn“ ist eine eingetragene Marke der B. Braun Surgical GmbH.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.