



- Ausgezeichnetes Exsudatmanagement
- Kosteneffizienz durch seltene Verbandwechsel
- Optimaler Tragkomfort
- Hohe Retentionskraft
- Keine Druckstellen unter Kompressions-Therapie



# Askina<sup>®</sup> Foam

DER SCHLÜSSEL FÜR EIN SICHERES EXSUDATMANAGEMENT

# Askina® Foam

## HÖCHSTE ABSORPTIONSKAPAZITÄT BEI EXZELLENTER RETENTIONS-EIGENSCHAFT


### ZWEILAGIGE, NICHTHAFTENDE SCHAUMSTOFF-WUNDAUFLAGE

#### Schicht 1: Film

Transparenter, dampfdurchlässiger Polyurethanfilm, der für Wasser und Bakterien undurchlässig ist und sich durch einen optimalen MVTR-Wert auszeichnet. Wasserdampfdurchlässigkeit: 150 g / 100 cm<sup>2</sup> / 24 h


#### Schicht 2: Schaumstoff

Hydrophile, atmungsaktive, hochabsorbierende Schicht aus Polyurethanschaumstoff. Das Wundexsudat wird in den Polyurethanschaumstoff absorbiert. Absorption: 59 g / 100 cm<sup>2</sup> / 24 h

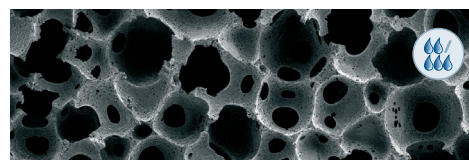



Askina® Foam besteht aus einem weichen Polyurethan-Schaumstoff mit einer offenen Zellstruktur. Diese absorbiert Flüssigkeiten, hält diese zurück und verhindert gleichzeitig das Einwachsen von Granulationsgewebe in die Wundauflage.


### PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Grösse	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
<b>Askina® Foam</b> 	Nicht haftende, hoch absorbierende Schaumstoff-Wundauflage für mässig bis stark exsudierende Wunden mit hoher Retentionseigenschaft. Auch unter Druck wird die aufgenommene Flüssigkeit nicht wieder abgegeben.				
	5 x 7 cm	10	7240710	3987047	35.05.03.01.1
	10 x 10 cm	10	7241010	3987053	35.05.03.03.1
	10 x 20 cm	10	7241210	3987076	35.05.03.04.1
	20 x 20 cm	5	7242005	3987082	35.05.03.06.1

### VERSORGUNG VON TIEFEN WUNDEN UND KAVITÄTEN

<b>Askina® Foam Cavity Strips</b> 	Nicht haftende, hoch absorbierende, weiche Schaumstoff-Streifen für Wundtaschen und Fisteln. Exzellentes Exsudatmanagement, passen sich der Wunde an, optimaler Tragkomfort.				
	2.5 x 40 cm	10	7246010	3996394	35.05.03.03.1
<b>Askina® Trachea</b> 	Nicht haftende, hoch absorbierende Schaumstoff-Wundauflage für die Versorgung von Trachealkanülen und Drainagen, exzellentes Exsudatmanagement, Minimierung der Wundrandmazeration.				
	9.5 x 8.5 cm	10	7248510	3987107	35.05.03.11.1

### VERSORGUNG DER FERSE

<b>Askina® Heel</b> 	Hoch saugfähige Schaumstoff-Wundauflage für die Ferse in anatomischer Form, optimale Druckentlastung, Schutz vor Wundkontamination.				
	225 cm <sup>2</sup>	5	7240105	2993821	34.06.01.04.1