

# Ureofix® 112 Plus


## Mehr Sicherheit mit System

Geschlossene Urindrainage



NEU: Mit Silikonport  
zur nadelfreien  
Probenentnahme

# Ureofix® 112 Plus Geschlossene Urindrainage

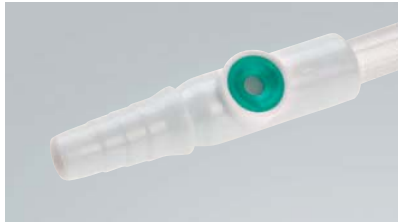

Stufenkonus mit integriertem wiederabdichtendem Silikonport zur **nadelfreien** Probenentnahme (auch mit Kanüle möglich)




**Latexfreie Handschuhe inklusive**  
1 Paar sterile, latexfreie Schutzhandschuhe (puderfrei) zum hygienischen Wechsel des Systems im Set enthalten



Geschlossenes Urindrainagesystem mit dem 3fach-Sicherheitskonzept

- **Transparente Tropfkammer mit Membranventil**
- **Bodenablassventil mit Einstecklasche**
- **1 Paar Handschuhe inklusive**

- Belüfteter Urinbeutel 2 l
- Silikonport am Stufenkegel zur nadelfreien Probenentnahme
- Überleitungsschlauch 110 cm Länge mit Schiebeklemme und Schlauch-Fixierklemme

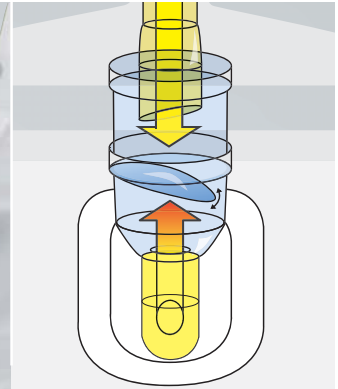

#### Bakteriendichte Tropfkammer

- Verhinderung der retrograden Keimwanderung und der damit verbundenen Infektionsgefahr
- Optimierter Druckausgleich und sicheres Ablaufverhalten, selbst unter hoher Belastung
- **Optimiertes Antirefluxsystem** – Membranventil in Tropfkammer und Folienflatterventil im Beutel



#### Nachtropfsicheres Bodenablassventil



#### Belüftete Einstecklasche

Zur Fixierung des Bodenablassventils und zur Vermeidung von Kontaminationen

- Bakteriendichte Tropfkammer mit Schutzmembran
- Bodenablassventil mit belüfteter Einstecklasche
- Aufhängung des Systems mit Haken, Kordel
- 1 Paar sterile, latexfreie Handschuhe (puderfrei) inklusive

Ureofix® 112 Plus	REF	Tarif-Nr.	VE
Beutel 2.000 ml, steril	28431D	5! (%#2 " "	25

